


# TRAVERSE RESCUE STRETCHER

Barella Spazi-Confinati



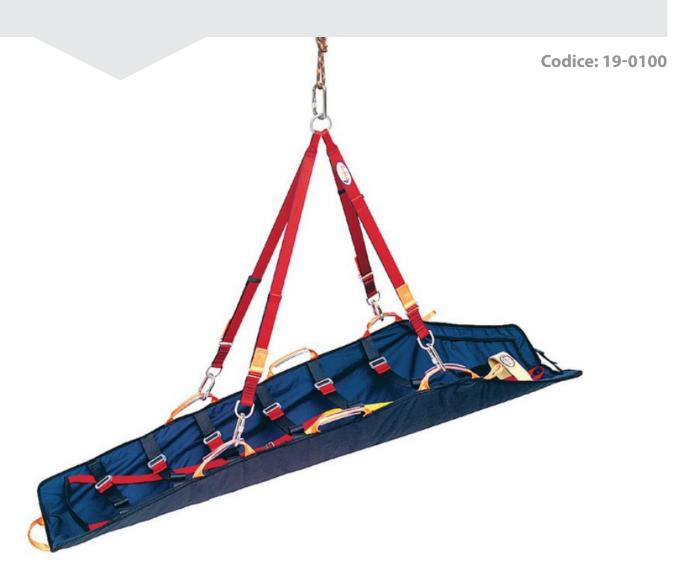

# TRAVERSE RESCUE STRETCHER





Studiata e progettata per il recupero e il sollevamento verticale e orizzontale. Il design leggero e compatto rende la barella Spazi-Confinati Traverse Rescue Stretcher (TRS) ideale per il soccorso con elicottero e il recupero in spazi confinati.

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- La forma avvolgente dona un senso di sicurezza al paziente durante il trasporto, proteggendo gli arti da urti laterali durante le procedure di evacuazione.
- TRS è costituita da uno strato interno in polietilene ad alta densità che le conferisce la rigidità necessaria quando viene piegata intorno al paziente. Il guscio esterno è costituito da due differenti materiali: la base è in 1350 Denier Cordura nylon con rivestimento in poliuretano, intrecciati in modo da creare un'elevata resistenza al taglio e all'abrasione; lo strato superiore è 1000 Denier Cordura, che la rende confortevole e comoda a contatto con il paziente.
- Le maniglie di trasporto e i punti di aggancio per il sollevamento verticale tramite sospendite sono realizzati da una rete di 51 mm. Le maniglie di trasporto hanno una copertura in plastica per una confortevole e salda presa da parte degli operatori.
- Le 6 cinture e il sistema di imbracatura integrati (codice colore) consentono di assicurare il paziente alla TRS durante il recupero. Le cinture in corrispondenza delle spalle e dell'inguine sono imbottite in modo da non creare disagi e costrizioni per il paziente. TRS è dotata di una cintura per il supporto e il bloccaggio dei piedi durante i sollevamenti verticali.
- Completa di uno zaino da trasporto in Cordura, la barella Spazi-Confinati TSR è facile da stoccare e comoda da trasportare.

## **SPECIFICHE TECNICHE**

Lunghezza		2020 mm
Larghezza		840 mm
Peso		8 kg
Capacità di carico	(sollevamento orizzontale) (sollevamento verticale)	350 kg 250 kg

## **ACCESSORI OPZIONALI**

Descrizione	Codice
Sospendite HARD EYE, regolabili per TRS	
con anelli in acciaio (moschettone non incluso)	
Sospendite SOFT EYE, regolabili per TRS	15-0109
con asole (moschettone non incluso)	



